

Prophylaxie

7

PÂTES POUR LE NETTOYAGE ET POLISSAGE	7.2
ACCESSOIRES NETTOYAGE ET POLISSAGE	7.5
INSTRUMENTS DE PARODONTIE	7.8
PERIOSTAR 3000	7.10
SEALANT	7.11
DIVERS	7.11

Pâtes pour le nettoyage et polissage

Cleanic en pots et en doses unitaires

Ces pâtes sont à base de Perlite

US Pat. 6 576 225, EP Pat. 0 268 763
EP Pat. 0 528 756, JP Pat. 3 478 549, Other Pat. pend.



Cleanic Single Dose

3140 Doses de 2 g



Godet bague


985




Prophy-Clip

3151

Cleanic® est une pâte prophylactique universelle intégrant un système de nettoyage différentiel : la pâte effectue dans un premier temps un nettoyage dentaire efficace et, dans un second temps, un polissage de haute qualité. Pendant les premières secondes d'utilisation, les particules de perlite incluses dans la pâte exercent une action nettoyante vigoureuse. Leur fragmentation progressive entraîne secondairement un effet de polissage sur les surfaces dentaires. Cette technologie basée sur l'utilisation des particules de perlite fait de Cleanic une pâte unique, intégrant conjointement des propriétés nettoyantes et polissantes, sans risques de dommage aux tissus dentaires. L'utilisation d'une pâte unique pour toutes les phases du traitement prophylactique représente un gain de temps considérable.

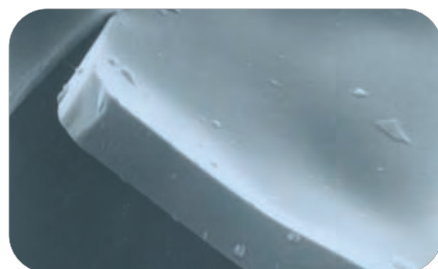

Avant

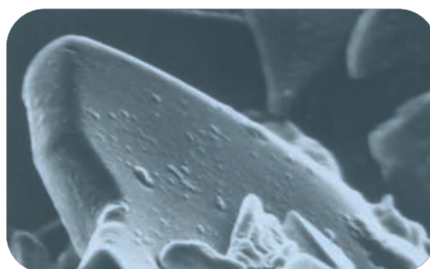

Après

Les images au microscope électronique à balayage illustrent la transformation des particules de Perlite de Cleanic au cours de leur utilisation. On voit clairement la réduction que subissent les particules de formes à angles nets (exerçant une action nettoyante) à des formes plus émoussées (polissage).



Coffret d'introduction Cleanic

3100



Kits d'introduction Cleanic		
Avec fluorures : cartouche contenant 200 g de pâte de prophylaxie, 8 godets bague pour pâte, 3 spatules		3100
Sans fluorures : cartouche contenant 200 g de pâte de prophylaxie, 8 godets bague pour pâte, 3 spatules		3200
Réassorts Cleanic		
Cartouche Cleanic avec fluorures (0.15% CaF)	200 g	3110
Cartouche Cleanic sans fluorures	200 g	3210
Cartouche Cleanic avec fluorures (0.15% CaF)	100 g	3130
Cartouche Cleanic sans fluorures	100 g	3230
Doses individuelles Cleanic avec fluorures		
Contient : 200 doses individuelles Cleanic (2 g) et 3 godets bague. Avec fluorures 0.10% (NaF)		3140
Godets bagues pour doses unitaires		
Godets bague, paquet de 100, Non autoclavable		985
Prophy-Clips, paquet de 6, autoclavables jusqu'à 134°C, au moins 3 min.		3151

Cleanic
RDA: 27.0

REA: 3.4

Cleanic en Tube

Ces pâtes sont à base de Perlite

Cleanic® – la pâte prophylactique universelle qui offre un degré de nettoyage variable, désormais disponible en tube avec embouts à visser pour une utilisation facilitée.

Cleanic en tube Mint

Contient : 100 g pâte de prophylaxie, avec fluorures (0.10% NaF) et arôme menthe **3180**

Cleanic en Tube Bubble Gum

Contient : 100 g pâte de prophylaxie, avec fluorures (0.10% NaF) et arôme Bubble Gum **3181**

Cleanic en Tube Green Apple

Contient : 100 g pâte de prophylaxie, avec fluorures (0.10% NaF) et arôme Pommes Vertes, **sans menthol** **3182**

Nouveau Cleanic en tube, Mint sans fluor

Contient : 100 g pâte de prophylaxie, sans fluor, et arôme menthe **3183**



Cleanic
RDA: 27.0 REA: 3.4

CleanPolish et SuperPolish

Pâtes à base de pierre ponce

CleanPolish est une pâte bien connue qui nettoie rapidement et efficacement les dents naturelles et les obturations. En utilisant SuperPolish après un nettoyage/polissage complet on obtient un résultat visible qui impressionnera les patients et les praticiens les plus exigeants. **SuperPolish** apporte un brillant miroir aux dents naturelles et aux obturations métalliques.

CleanPolish et SuperPolish

CleanPolish: 50g de pâte, sans fluorures, aromatisée à l'anis **360**

SuperPolish: 45g de pâte, sans fluorures, aromatisée à l'anis **361**

Ensemble comprenant des brossettes en soies naturelles :

1 CleanPolish (réf. 360), 1 SuperPolish (réf. 361), 20 brossettes (réf. 831 RA) **831 CLID**

Ensemble comprenant des brossettes en nylon :

1 CleanPolish (réf. 360), 1 SuperPolish (réf. 361), 20 brossettes (réf. 835 RA) **835 CLID**



CleanPolish **360**



SuperPolish **361**



Ensemble avec des brossettes en soies naturelles **831 CLID**



Ensemble avec des brossettes en nylon **835 CLID**

CleanPolish
RDA: 43.8 REA: 5.5

SuperPolish
RDA: 9.8 REA: 4.5

Tri-Fluor-O-Clean

Pâtes à base de pierre ponce et silicate de zirconium

Pâte prophylactique pour le nettoyage et la fluoruration. Tri-Fluor-O-Clean est un excellent produit de nettoyage qui élimine la plaque dentaire et les colorations de surface, sans, normalement, ternir le brillant des prothèses en or. Au cours du nettoyage, la surface de l'émail se trouve activée et modifiée par trois complexes fluorés. Ces fluorures agissent selon des mécanismes d'action différents : le fluorure de sodium (NaF) apporte une fluoruration importante et immédiate accompagnée d'un phénomène d'adsorption, le fluorure de calcium (CaF₂) possède une action retard et prolonge la clairance buccale de F- et le monofluorophosphate (MFP) qui catalyse la reminéralisation des caries débutantes.

Tri-Fluor-O-Clean

Small : 50g de pâte avec trois fluorures, aromatisée à la menthe **983**

Big : 300g de pâte avec trois fluorures, aromatisée à la menthe **984**



Tri-Fluor-O-Clean **983**

Tri-Fluor-O-Clean
RDA: 34.5 REA: 7.3

Hawe Implant Paste – Pour le nettoyage et polissage prophylactique des implants

Pâte non fluorée, à base d'oxyde d'aluminium

La Hawe Implant Paste a été développée spécifiquement pour assurer une maintenance efficace et atraumatique des implants! Hawe Implant Paste est sans fluor, cette pâte contient de l'oxyde d'aluminium et s'applique idéalement après avoir éliminé – à l'aide d'un instrument en plastique – les dépôts mous autour d'un implant. La formulation spéciale de cette pâte prophylactique et sa valeur minimale d'abrasivité (RDA 10) permettent aux professionnels de nettoyer les surfaces des implants sans les rayer ni les abîmer. L'état de surface obtenu permet de ralentir la formation de plaque et de nouveaux dépôts durs, ce qui est la condition pour maintenir l'implant sain et ainsi assurer la pérennité de la restauration.

Toutes les cupules et/ou brosses peuvent être recommandées pour l'application de cette pâte.

Hawe Implant Paste

Contient: 45g de pâte pour implants, sans fluorures et arôme menthe

3500

Caractéristiques :

- **Goût à la menthe.** Le goût le plus accepté par patients.
- **Sans pierre ponce.** N'abîme pas la surface des implants. La pâte contient de l'oxyde d'aluminium (particules très fines).
- **Sans fluorures.** Pas de risques d'interactions ou de corrosions.
- **RDA < 10µ.** Selon les recommandations des fabricants d'implants.



Hawe Implant Paste

RDA: 9.8

REA: 4.5



La pâte spéciale pour le nettoyage prophylactique des implants!



Elimination des dépôts avec un Universal Implant Deplaquer.



Elimination des dépôts avec un Orofacial Implant Deplaquer.



Application de la pâte avec une brosse conique en poil naturel (article 0240)



Application de la pâte avec une cupule en pointe (article 1805).



Application de la pâte avec une cupule en pointe (article 1805).



Application de la pâte avec une cupule spirale (article 1801).

Accessoires nettoyage et polissage

Hawe Brossettes miniatures de nettoyage et de polissage dentaire

Le plus petit format pour ce type de brosses. Conception optimale et qualité absolue.

Fibres naturelles, pour contre-angle (CA),

Paquet de 10 brossettes

831 RA



Fibres Naturelles

831

Fibres naturelles, pour CA,

Paquet de 100 brossettes

831/100

Fibres Nylon, pour CA,

Paquet de 10 brossettes

835 RA



Fibres de Nylon

835

Fibres Nylon, pour CA,

Paquet de 100 brossettes

835/100

Pro-Brush

Brossette miniature de nettoyage et de polissage dentaire.

Pro-Brush est une brosse miniature de nettoyage et de polissage d'excellente qualité, facilement reconnaissable grâce à sa bague bleue. Exceptionnelle: la fixation en plastique des brossettes Probrush évite de rayer et d'abîmer la surface des dents lorsqu'elle entre accidentellement en contact avec celle-ci lors du nettoyage/polissage.

Fibres naturelles, pour contre-angle (CA), Paquet de 10 brossettes

841 RA



Fibres Naturelles

841

Fibres naturelles, pour CA, Paquet de 100 brossettes

841/100

Fibres Nylon, pour CA, Paquet de 10 brossettes

845 RA



Fibres de Nylon

845

Fibres Nylon, pour CA, Paquet de 100 brossettes

845/100

Pasteless Prophy

Pasteless Prophy s'utilise pour le polissage des dents avant la prise de teinte lors d'un traitement prothétique. Elles sont aussi utilisées pour redonner un brillant naturel aux dents après dépose de brackets orthodontiques. Ces pointes libèrent du fluor et donnent un poli exceptionnel (comparable à celui du Cleanic).

Avantages :

- Pouvoir nettoyant élevé permettant une élimination maximale des colorations.
- Très grand pouvoir polissant pour une meilleure esthétique.
- Fluoration par adsorption confirmée, liée à la libération continue de particules de fluorure
- La rugosité après polissage est comparable à celle obtenue avec Cleanic : il a été scientifiquement démontré que l'abrasion était minime pour une efficacité maximum du nettoyage.
- Aide à diminuer la formation de la plaque dentaire.
- Sans latex
- **NOUVELLE formule améliorée** : peut passer plusieurs fois en autoclave sans modifier la teneur en fluor ni sa libération en cours d'utilisation !



Libère du fluor pendant son utilisation !

Pasteless Prophy

Cupule, boîte de 15	1950
Flamme, boîte de 15	1951
Disque, boîte de 15	1952
Assortiment, emballage de 15 unités assorties (5 Cupule, 5 Flamme, 5 Disque)	1953

Cupules à polir sans fluor

Ce produit innovant possède les mêmes indications et avantages que les Pasteless-Prophy sans contenir ni libérer de fluor.

Flamme, boîte de 6

ID 6021/6

Minipoint, boîte de 6

ID 6071/6

Cupule, boîte de 6

ID 6081/6

Pro-Cup



La gamme de cupules Pro-Cup® permet une application économe de pâte à polir, avec un minimum d'éclaboussures. Par l'effet des forces hélicoïdales lié à leur conception lamellaire interne et externe, les cupules Pro-Cup propulsent la pâte à polir et la salive vers les marges de la cupule : la pâte et la salive sont ainsi continuellement présentes sur la surface dentaire à polir. La formation d'une masse de liquides au-dessus de la surface travaillante est donc évitée, de même qu'est diminué l'effet de réchauffement par frottements. Les cupules sont disponibles en versions souple (bleu-clair) et dure (bleu foncé).

Cupules Pro-Cup Soft, bleu clair

Cupule pour CA, paquet de 30	990/30
Cupule pour CA, paquet de 120	990/120
Cupule à vis, paquet de 30	1810/30
Cupule à vis, paquet de 120	1810/120

Cupules Pro-Cup Hard, bleu foncé

Cupule pour CA, paquet de 30	991/30
Cupule pour CA, paquet de 120	991/120
Cupule à vis, paquet de 30	1811/30
Cupule à vis, paquet de 120	1811/120

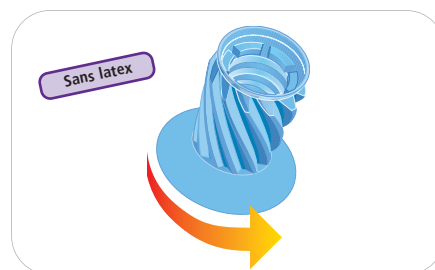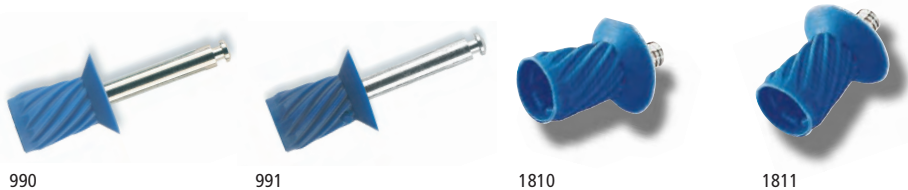

Pro-Cup



Cupule Pro-Cup Soft

990/30

Pro-Cup® Junior

Particulièrement indiquées chez les enfants et dans les petites cavités buccales.

Cupules Pro-Cup Soft/Souples Junior, bleu clair

Cupule pour CA, paquet de 30	992/30
Cupule pour CA, paquet de 120	992/120
Cupule à vis, paquet de 30	1812/30
Cupule à vis, paquet de 120	1812/120

Cupules Pro-Cup Hard/Dures Junior, bleu foncé

Cupule pour CA, paquet de 30	993/30
Cupule pour CA, paquet de 120	993/120
Cupule à vis, paquet de 30	1813/30




Pro-Cup

Pro-Cup Junior

Hawe Système de polissage Cupules et Brossettes

Cupules à fixation par clip

Cupule à lamelles, caoutchouc souple gris (30), sans latex	957/30
Cupule à lamelles, caoutchouc souple gris (120), sans latex	957/120
Cupule à lamelles, caoutchouc dur blanc (30), sans latex	965/30
Cupule à lamelles, caoutchouc dur blanc (120), sans latex	965/120
Cupules striées, caoutchouc souple gris (30)	958/30
Cupules striées, caoutchouc dur blanc (30), sans latex	959/30

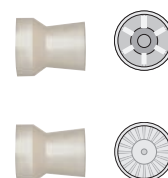

Réf. Produit

Brossettes à fixation par clip

Forme normale, paquet de 30, fibres naturelles 978/30

Forme de pointe, paquet de 30, fibres naturelles 979/30

Mandrins adaptateurs pour cupules à fixation par clip (à utiliser avec toutes les brosettes et cupules Snap-On)

3 mandrins 976

10 mandrins 976/10

Cupules pour contre-angle (CA)

Cupule CA à lamelles caoutchouc souple gris (30) 960/30

Cupule CA à lamelles caoutchouc souple gris (120) 960/120

Cupule CA à lamelles, caoutchouc dur blanc (30) 967/30

Cupule CA à lamelles, caoutchouc dur blanc (120) 967/120

Cupules CA striées, caoutchouc souple gris (30) 961/30

Cupules CA striées, caoutchouc dur blanc (30) 962/30

Cupules CA, caoutchouc dur blanc (30), fibres naturelles 963/30

Brossettes pour contre-angle

Brossettes CA normales, paquets de 30, fibres nylon 0270/30

Brossettes CA normales, paquets de 120, fibres nylon 0270/120

Brossettes CA pointes, paquets de 30, fibres nylon 969/30

Brossettes CA pointes, paquets de 120, fibres nylon 969/120

Cupules à visser

Cupules striées, caoutchouc souple gris (30), sans latex 1801/30

Cupules striées, caoutchouc souple gris (120), sans latex 1801/120

Cupules striées, caoutchouc dur blanc (30), sans latex 1802/30

Cupules striées, caoutchouc dur blanc (120), sans latex 1802/120

Cupules striées, caoutchouc souple gris (30), sans latex 1800/30

Cupules striées, caoutchouc souple gris (120), sans latex 1800/120

Cupules striées, caoutchouc dur blanc (30), sans latex 1809/30

Cupules striées, caoutchouc dur blanc (120), sans latex 1809/120

Cupules striées Small, caoutchouc souple gris (30), sans latex 1803/30

Cupules striées Small, caoutchouc dur blanc (30), sans latex 1804/30

Cupule en pointe, caoutchouc souple gris (30) 1805/30

Cupule spirale, caoutchouc souple gris (30), sans latex 1807/30

Brossettes à visser

Brossettes taille normale, paquet de 30, fibres naturelles 0210


Brossettes pointes, taille normale, paquet de 30, fibres naturelles 0230

Brossettes, taille Small, paquet de 30, fibres naturelles 0220

Brossettes pointes, taille Small, paquet de 30, fibres naturelles 0240

Mandrins pour cupules à visser (pour utiliser sur contre-angle les brosettes et cupules à visser)

10 mandrins 1301

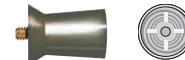

Instruments de parodontie

Click-Probe®

Sonde parodontale à pression contrôlée munie de l'excellent „Click-System” qui se déclenche toujours à une pression d'environ 20 à 25 g (équivalent de 0,2 à 0,25 N). Cette sonde parodontale permet des mesures de poche précises et reproductibles non opérateur dépendant. Parfaitement atraumatique, son clic clairement audible évite de léser l'attache épithéliale. S'utilise également pour les implants. Autoclavable jusqu'à 134°C, au moins 3 min.

Sonde Click-Probe, échelle 3/6/9/12 (vert), 3 sondes	1390
Sonde Click-Probe, échelle 3/6/9/12 (vert), 1 sonde	1391
Sonde Click-Probe, échelle 3/5/7/10 (bleu), 3 sondes	1395
Sonde Click-Probe, échelle 3/5/7/10 (bleu), 1 sonde	1396



Sondage parodontal, précis et non opérateur dépendant.



Vert : échelle 3/6/9/12



Bleu : échelle 3/5/7/10

Implant Deplaquers

Les « Implant Deplaquers » (instruments à détartrer pour implants) autoclavables et sans métal sont destinés à l'élimination efficace et en douceur des dépôts mous sur les surfaces implantaires, sans risquer de rayer leur surface. Ces instruments sont renforcés en fibre de carbone et existent en deux versions : Universal (pour une utilisation générale) et Orofacial (pour des surfaces latérales plus étendues). Après le curretage avec les Implant Deplaquers, il est recommandé de terminer par une séance de nettoyage et de polissage avec la nouvelle pâte Hawe Implant Paste. Pour ce faire, un choix de cupules et brosettes les plus utilisées font partie du « recall set », kit de maintenance. Autoclavable jusqu'à 134°C, au moins 3 min.

Coffret de Implant Deplaquers	3520
--------------------------------------	-------------

Contient : 2 Orofacial Implant Deplaquers, 2 Universal Implant Deplaquers, 2 Sondes parodontales, 20 cupules (réf. 1805 et 1807, x10), 20 brosettes (réf. 0220 and 0240, x10), 10 mandrins (réf. 1301)

Réassorts

Universal Implant Deplaquer, jeu de 5	1350
Universal Implant Deplaquer, jeu de 2	1351
Orofacial Implant Deplaquer, jeu de 5	1360
Orofacial Implant Deplaquer, jeu de 2	1361



Excellents instruments pour l'entretien professionnel des implants !



Universal Implant Deplaquer pour une utilisation générale

1350



Orofacial Implant Deplaquer pour des surfaces latérales plus étendues

1360



Coffret de Implant Deplaquer

3520



Irrigation Probe

Sondes d'irrigation ; elles présentant à leur extrémité une ouverture latérale et un bout mousse. Conçues pour une irrigation professionnelle, non traumatisante des canaux dentaires et des poches parodontales, sans risques de perforation apicale ou de dommages tissulaires.

Irrigation Probe Intro Kit

500

Contenu: 30 canules de rinçage (Réf. Produit 502 et 505: 5 unités; Réf. Produit 503 et 504: 10 unités)

Recharges

Gauge n° 21 Ø 0,8 mm vert (0.8 mm x 25 mm), paquet de 40

502

Gauge n° 23 Ø 0,6 mm bleu (0.6 mm x 25 mm), paquet de 40


503

Gauge n° 25 Ø 0,5 mm orange (0.5 mm x 25 mm), paquet de 40


504

Gauge n° 30 Ø 0,3 mm jaune (0.3 mm x 25mm), paquet de 40


505

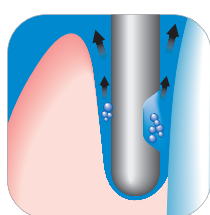

Irrigation des poches parodontales

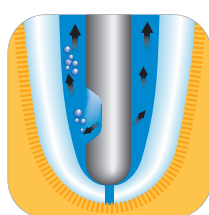

Irrigation des canaux dentaires

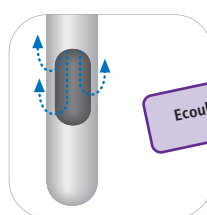

Ecoulement des liquides résultant des ouvertures latérales

Luer-Lock : compatible avec toutes les seringues classiques !

Perio-Probe

Code couleur de la graduation des sondes parodontales : 3/5/7/10 mm. Lecture qualitative rapide de la présence de poches parodontales et de leur profondeur grâce au code. Elle peut aussi s'utiliser pour les implants. Autoclavable jusqu'à 134°C, au moins 3 min.

Perio-Probe, paquet de 5 sondes

1370


Perio-Probe, paquet de 2 sondes

1371



Perio-Probe

1370

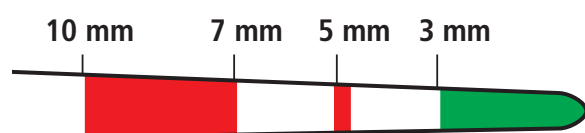

Vert visible (< 3mm) :
bonne santé

Vert visible (< 3mm), avec
saignement : gingivite

Le Vert non visible (> 3mm) :
poche à traiter !

Peut aussi s'utiliser pour les implants !

Perio Soft-Scaler®

Instrument plastique pour l'élimination des dépôts mous et faiblement minéralisés dans et autour des poches. Cet instrument réalise un bon compromis entre efficacité, non-agressivité envers les dents et souplesse. N'est pas indiqué pour le tartre dur à éliminer au cours d'une séance normale de détartrage. Les curettes peuvent être affûtées et autoclavées jusqu'à 134°C, au moins 3 min.

Perio Soft-Scaler, paquet de 5

1380


Perio Soft-Scaler, paquet de 2

1381



Perio Soft-Scaler

1380

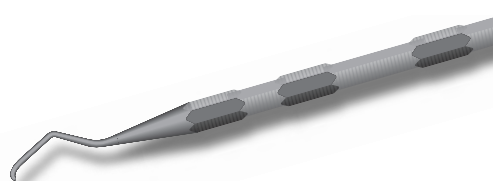

Conçu pour le nettoyage en douceur des poches parodontales !

PerioStar 3000



La solution pour un affûtage facile et standardisé des instruments de parodontie. Son utilisation est simple et fournit d'excellents résultats quel que soit l'utilisateur.

PerioStar® 3000


PerioStar 3000

3000 F

Contenu : Unité d'alimentation à faible voltage (12V), 2 lames d'affûtage (medium/moyenne et superfine/extra-fine), 1 tube de pâte à affûter (20 ml), 1 tige d'essai en acrylique (4 x 60), 2 porte-outil magnétique, 1 étui de protection des instruments, vidéo d'instructions (DVD), mode d'emploi, notice Quickstart (mode d'emploi abrégé)

Accessoires PerioStar 3000

Pierres à affûter Coarse (bleu), paquet de 2 pierres	3019
Pierres à affûter Medium (rouge), paquet de 2 pierres	3020
Pierres à affûter Superfine (blanc), paquet de 2 pierres	3021
Tubes de pâte d'affûtage, paquet de 2 tubes	3022
Tiges d'essai en acrylique (4 x 60), paquet de 5 tubes	3023
Etui de protection pour instruments, paquet de 5	3024
Porte-outil magnétique, paquet de 5	3025
Adaptateur 230 V	3065 EU
DVD PerioStar Multilingue	P3000 MULTI

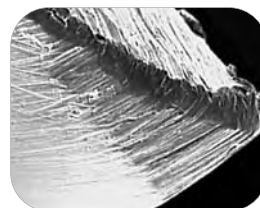

Les problèmes :

L'affûtage manuel des instruments est une tâche fastidieuse et dispendieuse en temps ; les résultats sont inconstants même pour un individu expérimenté, et il est difficile de déléguer cette tâche à autrui.

Certaines études ont montré que 5 instruments sur 8 affûtés manuellement le sont insuffisamment (Lehmann N - Etude comparative de l'affûtage manuel et mécanisé des instruments employés en parodontie, Thèse, 1992 : 94).



La solution :

PerioStar 3000, la référence pour un affûtage facile des instruments de parodontie.

Des instruments affûtés à tout moment grâce aux propriétés du système :

- Fixation et stabilisation mécanique de l'instrument.
- L'angle d'affûtage est prédéfini et reproductible pour chaque utilisation.
- Utilisation facile ; excellents résultats, indépendants de l'utilisateur.

Avantages :

- **Performance améliorée**
Un meilleur rendement et un gain de temps
- **Réduction des coûts**
L'affûtage des instruments peut être délégué au personnel auxiliaire, vous laissant plus de temps pour vos patients.
- **Un travail plus satisfaisant**
Les instruments affûtés sont plus efficaces ; pour moins de force mécanique exercée sur les surfaces traitées, vous obtenez un meilleur résultat, et le risque de glissade des instruments est diminué.



Sealant

Guardian Seal

Scellement de puits et fissures qui, grâce à une technologie brevetée, procure une protection élevée contre la carie occlusale. Guardian Seal™ possède une teinte et une opacité facilitant la visibilité, mais est suffisamment translucide pour permettre de déceler une carie. Le produit est chargé à 30% et offre une combinaison parfaite de fluidité et de résistance à l'abrasion. Le système d'application, qui comprend des embouts feutrés en forme de brochettes, permet une mise en place de Guardian Seal.

Guardian Seal - Coffret

31169

Contenu: 4 seringues (1 g), 40 embouts applicateurs en brochettes

Guardian Seal – Brush Tips

31323

Contenu: 40 embouts applicateurs en brochettes



Guardian Seal - Coffret

31169

Pour un produit de scellement des puits et fissures de dernière génération, reportez-vous à la page produit du **Vertise Flow!**

Divers

OptiView

L'écarteur pour lèvres et joues existe en deux tailles : standard (blanc) et petit (bleu)

OptiView™ est un dispositif absolument innovant, conçu pour apporter un écartement important des lèvres et des joues, et un accès tant vestibulaire que lingual. Grâce à sa forme anatomique, OptiView offre un confort irréprochable au patient, même durant de longues séances de soins. Par ailleurs, OptiView comporte une échancrure pour le frein labial, ce qui est un réel gage de confort pour ce nouveau dispositif astucieux ! Ses deux volets latéraux écartent délicatement les joues et peuvent être rapprochés l'un de l'autre pour faciliter la pose et la dépose d'OptiView.

L'utilisation d'OptiView offre un confort de travail dans de nombreuses indications dentaires. OptiView est recommandé chez les patients respirateurs buccaux pour lesquels le travail sous digue est difficile, aussi bien que pour ceux ayant des réflexes nauséeux. OptiView peut s'utiliser même en présence de fortes pressions labiales et est particulièrement indiqué sur les enfants, les seniors et les patients handicapés ; il facilite la prise des photographies, les traitements de blanchiment, le collage des bijoux dentaires et des brackets orthodontiques.

Les cadres et les bourrelets protecteurs seront autoclavables jusqu'à 134°C, au moins 3 min.

Kit OptiView standard

5500

Contenu : 2 écarteurs labiaux et jugaux Standard avec supports rembourrés

Kit OptiView small

5502

Contenu : 2 écarteurs labiaux et jugaux, petit format, avec supports rembourrés

Réassort supports rembourrés OptiView

5501

Contenu : 10 écarte



OptiView



Une visibilité parfaite, un confort irréprochable en plus.

- **Ecartement des tissus péri-buccaux.** Optimise la visibilité et l'accès au champ opératoire
- **Placement passif.** Sa conception tri-dimensionnelle, flexible et stable, facilite la pose et la dépose
- **Un confort amélioré pour le patient.** Sa conception anatomique assure un grand confort, même durant de longues séances de soins, et facilite le placement de la pompe à salive.



Discovery Trays (Gouttières jetables)

Gouttières pour arcade complète à usage unique et pour application topique de fluor. En Polyéthylène (Plastique).

Coffret standard - Coffret de 30 gouttières

Enfant, bleu clair	14202
Petit, jaune	14199
Moyen, citron vert	14200
Grand, bleu	14201

Grand coffret - Coffret de 100 gouttières

Enfant, bleu clair	16188
Petit, jaune	16189
Moyen, citron vert	16190
Grand, bleu	16191



Discovery Trays